




このたびは、おく楽 すべり止めマットをお求めいただきまして、
まことにありがとうございます。

- 正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

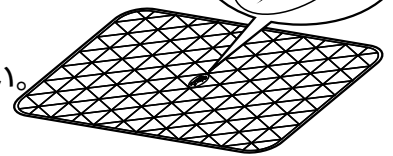

安全上のご注意

必ずお守りください

※三角形の柄（「安寿」ロゴマークがある面）の面が表面です。

この製品は、浴室での転倒予防、浴槽内で身体を安定させるためのすべり止めマットです。
それ以外でのご使用はおやめください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

注意 誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、下の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。

！ 必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。

○ してはいけない「禁止」内容を説明しています。

使用できない浴室環境

木製の浴槽、大理石の浴槽、泡の出る浴槽、お湯が循環している浴槽（24時間風呂）。
つるつるしたタイル敷きの洗い場、つるつるした小石敷きの洗い場、大浴場、温泉
記載された浴室環境以外でも使用前にマットがずれ動かないか十分に確認してからご使用ください。

使用前のご注意（使用前に必ず点検してください）


警告

次の点を実施すること


マットのすべり止め効果が十分に発揮されず、転倒やけがの原因になります。

- ・必ず浴室内（浴槽・洗い場）で使用する
- ・三角形の柄（「安寿」ロゴマークがある面）の面を上にして設置すること
- ・表面が硬くなる、製品の凹凸が磨耗している等、マットの劣化が著しい場合は使用を中止すること
- ・浴槽や洗い場、製品本体のぬめりや埃などの汚れ、石けんなどをとってから使用すること

マットをカットして使用する場合は、幅(35cm以上残すこと)
幅方向に対して直角にカットし、35cm以上を残すこと
マットのすべり止め効果が十分に発揮されず、つまずき転倒し、けがの原因になります。

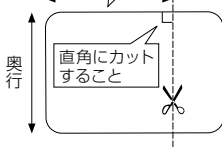

湯沸しが完了してから設置すること
マットが変形し、転倒やけがの原因になります。

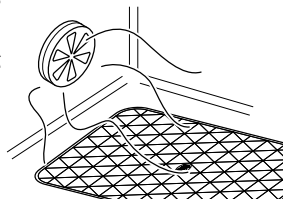


使用前に浴槽内のマットの位置を確認すること
マットを設置した状態で強くお湯をかき混ぜるとマットが移動する場合があります。マットの位置を確認してからご使用ください。

使用できない浴室環境に設置しないこと

マットのすべり止め効果が十分に発揮されず、転倒やけがの原因になります。


マットの上にものを置いて使用しないこと

マットの上のものがガタツキ、転倒やけがの原因になります。

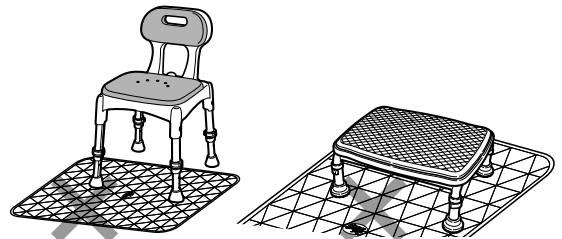

マットを折り曲げた状態で使用しないこと

マットのすべり止め効果が十分に発揮されず、つまずき転倒し、けがの原因になります。

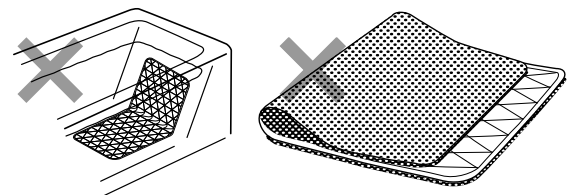

入浴剤入りのお湯が入った浴槽に設置しないこと
劣化し、転倒やけがの原因になります。


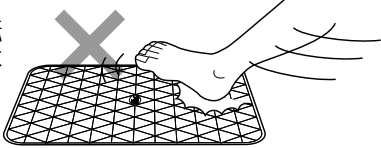
排水口（栓）の上にマットを設置しないこと
つまずき転倒し、けがの原因になります。

絶対にしないこと

必ず実行すること

使用中のご注意

⚠ 警告


! 必ず実行すること	真上からマット中央に足を乗せること 転倒し、けがの原因になります。	! 絶対にしてはいけない	すり足など使用上支障がある場合は注意すること つまずいて転倒し、けがの原因になります。
	使用者が自分の身体を十分に安定させられない場合は、必ず介助者が付き添うこと		人体に無害な材料を使用していますが、 肌に異常があったときは使用を中止すること
	背を大きく倒して座った状態では、マットのすべりに 寝そべった姿勢に近くなるため、利用者の体に働く浮 力の影響によりマットに十分な圧力が加わらず、マッ トがずべる可能性があります。 		片足で蹴るように着地したり、マット端部に大きく力 を加えないこと マットが移動し、転 倒やけがの原因にな ります。 

お手入れ上のご注意

⚠ 警告

! 必ず実施すること	次の点を実施すること 変色や劣化が起こり、転倒やけがの原因になります。また、カビの繁殖を促進する原因になります。 ・定期的にマットの表面、裏面のぬめりや汚れを落とすこと ・入浴時以外は浴槽からマットを取り出し、水洗いか乾いた布で乾拭きすること
------------	--

⚠ 注意

! 絶対にしてはいけない	中性洗剤を薄めて、スポンジか柔らかい布に含ませ汚れを取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流し、かげ干しか、乾いた布で乾拭きすること	絶対にしてはいけない	戸外に放置したり、直射日光に当たったりしないこと 劣化および変色の原因になります。
	次にあげるものでお手入れしないこと ・塩素系洗剤 ・酸、アルカリ性洗剤 ・シンナー ・クレゾール ・タワシ ・磨き粉 ・塩素系洗剤をかけての殺菌、消毒 ・その他製品を傷つけるもの 		温泉水、入浴剤をかけてのお手入れをしないこと 劣化および変色の原因になります。
! 絶対にしてはいけない		絶対にしてはいけない	塩ビ製フロアーマット(床)の上に長期間放置しないこと フロアーマットや製品に劣化および変色が起こる原因になります。
			ストーブなどの火気に近づけないこと 火災や変形、変色の原因になります。
		お手入れに洗濯機や乾燥機を使用しないこと 劣化の原因になります。	

使いかた


三角形の柄(「安寿」ロゴマークがある面)の面が上になるように設置してください。

浴槽内：浴槽底に設置してください。お湯に沈めるだけで設置できます。

洗い場：浴槽の出入りで足をつく場所など、すべりの気になるところに設置してください。


マットをカットする場合

マットはカットしてご使用できます。
マットをカットして使用する場合は、
幅方向に対して直角にカットし、
35cm以上を残すようにしてください。

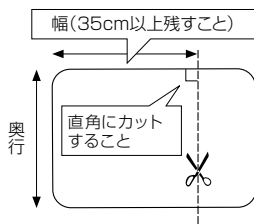

⚠ 警告

幅方向に対して直角以外に
カットしないこと
マットがめくれやすくなり、
つまずいて転倒し、
けがの原因になります。

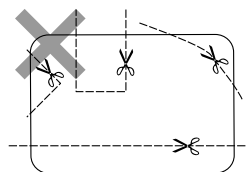

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

11.08

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
(12:00～13:00はのぞく)



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-22-1 五反田ANビル4階 TEL (03) 5420-1556

FAX (03) 5420-7750

東京支店 ☎(03) 5420-1562

仙台支店 ☎(022) 291-5477

大阪支店 ☎(06) 6448-5127

広島支店 ☎(082) 245-7100

名古屋支店 ☎(052) 203-0396

札幌営業所 ☎(011) 709-6011

福岡支店 ☎(092) 741-1411